

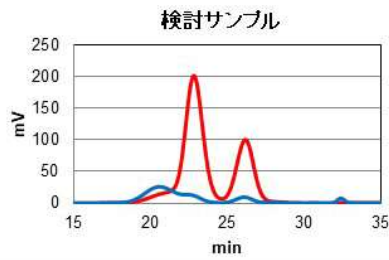
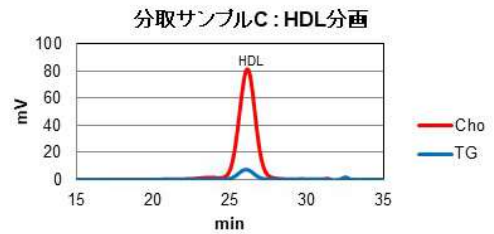


# 分取特異性データ

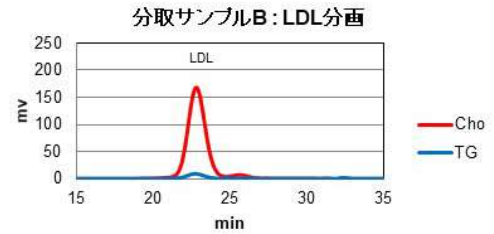

分取後、  
LipoSEARCH測定

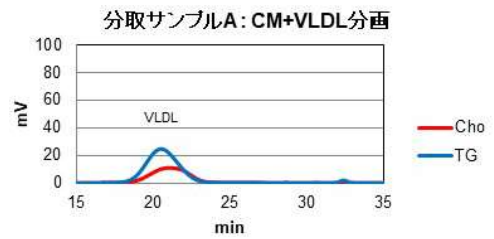

分取特異度:  
サンプルの総濃度に対する、目的分画の  
濃度の割合(%)

表1 分取特異度(%)

	コレステロール濃度			中性脂肪濃度		
	CM+VLDL	LDL	HDL	CM+VLDL	LDL	HDL
A	90.4	8.5	1.2	96.8	2.9	0.3
B	12.3	83.7	4.0	18.3	75.6	6.2
C	0.9	2.8	96.3	0.6	2.6	96.7

各分画とも高い分取特異性があります